

Abutment di guarigione Encode® Emergence

Procedura protesica

Il sistema per impronte Encode fornisce soluzioni ottimizzate ai medici eliminando la necessità di impronte a livello di impianto e semplificando il processo di trattamento per il chirurgo, il protesista e il laboratorio odontotecnico. Inoltre, i pazienti beneficiano di un'esperienza migliore e di un risultato estetico ottimale.

Utilizzo dell'abutment di guarigione come cappetta per impronta o scan body: i codici univoci sulla superficie oclusale dell'abutment di guarigione Encode Emergence eliminano la necessità di passare a una cappetta per impronta o a uno scan body.

Conservazione dei tessuti duri e molli: il mantenimento dell'abutment di guarigione senza cambiare i componenti contribuisce a conservare il tessuto, per un risultato estetico ottimale.

Profili di emergenza naturali:

- Guarigione più naturale dei tessuti con profili di emergenza dall'incremento graduale.
- Profilatura dell'osso non necessaria per impianti posizionati a una profondità massima di 1 mm rispetto alla cresta ossea, supportati da una porzione cilindrica dritta di 1 mm dalla piattaforma implantare.
- Disponibilità in un'ampia gamma di diametri del profilo di emergenza e in tre altezze: 3, 5 e 7 mm.

Finitura rosa opaca per un risultato estetico e scansioni chiare: la finitura rosa opaca si avvicina al colore della gengiva, garantendo un risultato estetico naturale dopo l'intervento, e riduce i riflessi nelle scansioni intraorali per immagini più chiare.

Codici intuitivi: schema di codici progettato per garantire un'interpretazione più facile:

- Il numero di fossette sotto la linea retta dell'occlusale dell'abutment indica il diametro della piattaforma.
- Il numero di fossette sul lato destro della cupola oclusale dell'abutment indica l'altezza dell'abutment.

Flussi di lavoro flessibili: dopo aver acquisito l'impronta o aver scansionato l'abutment di guarigione, il caso può essere inviato al proprio laboratorio di fiducia per una protesi finale con abutment CAD/CAM o Ti-Base.

Impronta digitale con scanner intraorale



Pulire dai detriti la superficie oclusale dell'abutment di guarigione Encode Emergence.



Eseguire la scansione dell'abutment di guarigione Encode Emergence con uno scanner intraorale seguendo le istruzioni del produttore.



Verificare di aver eseguito una scansione nitida dell'intera superficie oclusale codificata dell'abutment di guarigione Encode Emergence, dei contorni dei tessuti molli e dell'intera circonferenza dell'abutment di guarigione.




Eseguire la scansione dell'arcata opposta e della registrazione del morso.

5 Inviare la scansione al proprio laboratorio.

Abutment di guarigione Encode Emergence - Procedura protesica

Impronta tradizionale

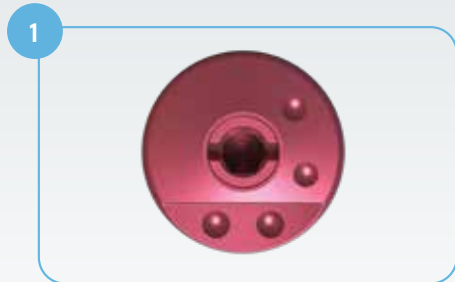

1 Pulire dai detriti la superficie oclusale dell'abutment di guarigione Encode Emergence.




2 Utilizzare un materiale da impronta di consistenza leggera attorno agli abutment di guarigione e un materiale da impronta elastomerico di consistenza media (polietere o polivinile) nel portaimpronta e alloggiarlo nella bocca.



3 Dopo il fissaggio del materiale da impronta, estrarre il cucchiaio dalla bocca. Verificare che l'impronta dell'intera superficie oclusale codificata dell'abutment di guarigione Encode Emergence sia nitida (non presenti lacerazioni, strappi, bolle o alterazioni) e che siano stati acquisiti l'intera circonferenza dell'abutment di guarigione e i contorni dei tessuti molli.



4 Prendere l'impronta dell'arcata opposta e della registrazione del morso.

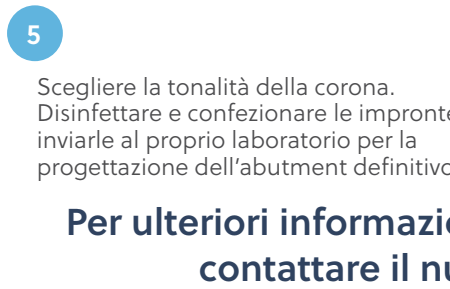

5 Scegliere la tonalità della corona. Disinfettare e confezionare le impronte; inviarle al proprio laboratorio per la progettazione dell'abutment definitivo.

Per ulteriori informazioni sugli abutment di guarigione Encode contattare il numero 0438-37681 o visitare il sito ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

ZimVie Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
ZimmerDental.Italy@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.™

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono proprietà di ZimVie Inc. o di una delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più consociate odontoiatriche di ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., ecc.) e sono commercializzati e distribuiti da ZimVie Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l'uso dei singoli prodotti. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/regioni. Il presente documento è destinato esclusivamente ai medici e non include pareri o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST0006IT REV B 03/23 ©2023 ZimVie. Tutti i diritti riservati.

CE
2797

