


Fixação fiável das
membranas RTG/ROG

Ti-System

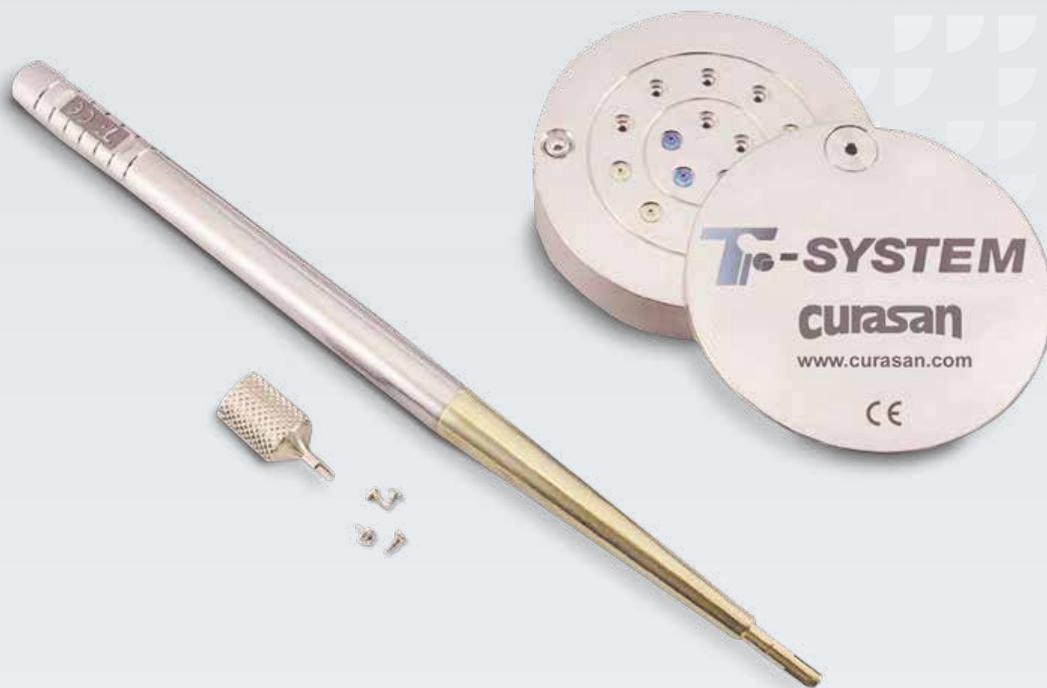

1 Estabilidade fiável

- Fixação segura, rápida e simples das membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis¹
- Imobilização eficaz das membranas e das partículas de enxerto ósseo para uma cicatrização sem problemas²

2 Tachas em titânio¹

- Conexão hexagonal para um encaixe seguro e um transporte estável até ao local cirúrgico
- Fabricados em titânio de grau 5
- Disponíveis com 3 mm de comprimento em embalagens de 5 unidades

3 Tacha com desenho inovador "Nail in – Screw out"

- Desenho roscado para uma fixação e retenção rígidas
- Fácil de remover com a chave hexagonal¹

4 Tabuleiro autoclavável

- Espaço para 15 tachas em titânio
- Fácil de abrir graças ao mecanismo de abertura com uma mão
- Adequado para limpeza e esterilização por máquina¹

1. Instruções de utilização do Ti-System, 1 de novembro de 2014.

2. Fugazzotto PA, Implant and regenerative therapy in dentistry: a guide to decision making. 2009: John Wiley & Sons.

Ti-System

Como funciona



1
Esterilização de todos os componentes antes da utilização.



2
Escolha a tacha no tabuleiro utilizando o dispositivo de aplicação e coloque-a in situ com um martelo.



3
No dia da reentrada, utilize a chave hexagonal para soltar a tacha e remova-a com uma pinça estéril.

Normalmente utilizado para:



Fig. A Procedimentos de elevação do seio lateral para fixar a membrana de pericárdio CopiOs®.



Fig. B Aumentos horizontais do rebordo para estabilizar o enxerto ósseo e a membrana de pericárdio CopiOs®.



Fig. C Procedimentos de colocação de enxertos verticais para fixar a membrana de PTFE OsseoGuard® reforçada com titânio.

Fotografias clínicas. ©2020 Dr. Alejandro Prieto, Espanha. Todos os direitos reservados. Os resultados individuais podem variar.

Informações para encomendas

Item no. #	Descrição	Classe de produto
CUR.9000810101	Ponteira em titânio, reta	I
CUR.9000810103	Peça de mão para tacha em titânio	I
CUR.9000810104	Chave hexagonal	I
CUR.9000810105	Tabuleiro de esterilização (máx. 15 tachas)	I
CUR.9000810106	Tachas em titânio, 3 mm de comprimento – embalagem de 5	IIb

Contate-nos através do número 800-827-836 ou visite o site ZimVie.com/dental

ZimVie Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens
FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

ZimVie

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da ZimVie e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. A membrana de pericárdio CopiOs® é fabricada pela Tutogen Medical GmbH. A membrana de PTFE OsseoGuard® é fabricada pela Osteogenics Biomedical, Inc. O Ti-System é fabricado pela curasan AG. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie Dental. ZV0596PT REV A 02/23 ©2023 ZimVie. Todos os direitos reservados

