


Diseño en
acero inoxidable

Bandeja para el lavado de material quirúrgico

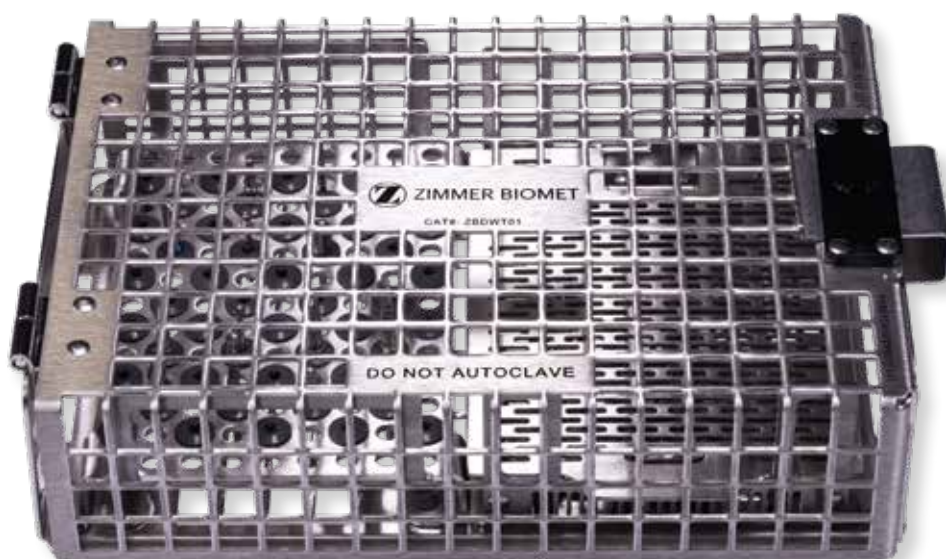

Compartimentalizada

Alberga los instrumentos pequeños y reutilizables en dos compartimentos extraíbles, uno con arandelas para fijar el extremo de bloqueo de las fresas y herramientas, y otro para dar cabida a otros instrumentos pequeños.

Compatibilidad

Su diseño poroso en acero inoxidable permite el paso del detergente y del agua durante los procesos de limpieza y aclarado en máquinas limpiadoras automáticas y en termodesinfectantes.

Aplicación universal

Permite albergar instrumentos pequeños para diferentes sistemas de implantes ofrecidos por ZimVie Dental.

 **ZimVie**

Bandeja para el lavado de material quirúrgico

La bandeja para el lavado de material quirúrgico está fabricada en acero inoxidable y puede albergar instrumentos pequeños y reutilizables para implantología dental durante el proceso automático de lavado y desinfección llevado a cabo por un termodesinfectante.


Compartimentalizada

- La bandeja de lavado contiene dos componentes extraíbles
- El compartimento con arandelas puede albergar hasta 50 instrumentos dotados de un cabezal de bloqueo conforme a la norma ISO
- El compartimento con tapa puede albergar los instrumentos pequeños que no disponen de bloqueo



Compatibilidad

- Diseño en acero inoxidable compatible con soluciones enzimáticas y alcalinas usadas por las máquinas limpiadoras automáticas/termodesinfectantes
- Su diseño poroso permite el paso del detergente y del agua durante el proceso de limpieza y aclarado

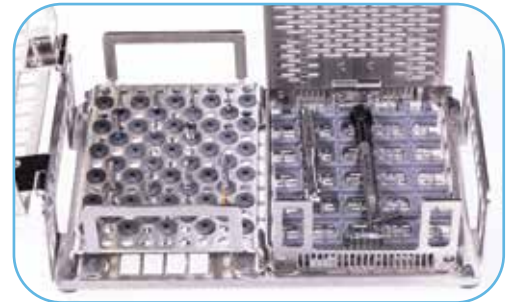

Universal

- Alberga instrumentos pequeños de implantología para diferentes sistemas de implantes ofrecidos por ZimVie Dental durante el proceso de limpieza automático



Información para pedidos



Referencia	Descripción
ZBDWT01	Bandeja para el lavado de material quirúrgico

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite [ZimVie.com](https://www.zimvie.com)

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de ZimVie, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZV2036ES REV  

A 12/23 ©2023 ZimVie. Todos los derechos reservados.