


Construção em
aço inoxidável

Tabuleiro de lavagem para cirurgia dentária

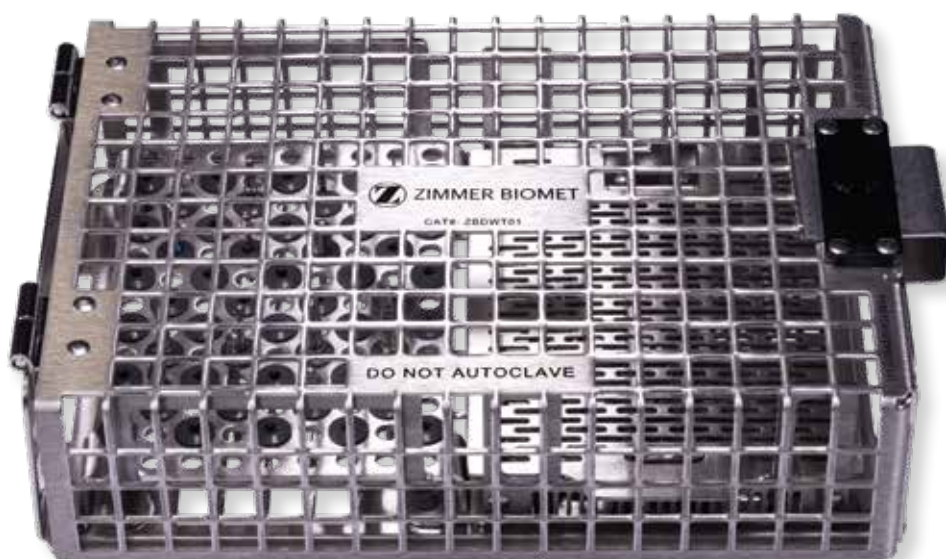

Compartimentado

Permite a colocação de instrumentos pequenos e reutilizáveis em dois compartimentos amovíveis, um com suportes para encaixar as extremidades com parafuso de fecho das brocas e ferramentas, e um segundo compartimento para colocar outros instrumentos pequenos.

Utilização universal

Permite a colocação de pequenos instrumentos de diferentes sistemas de implantes fornecidos pela ZimVie Dental.

Compatibilidade

A construção porosa em aço inoxidável permite a passagem do detergente e da água durante os processos de lavagem e enxaguamento em sistemas de lavagem e desinfecção térmica automatizados.

 **ZimVie**

Tabuleiro de lavagem para cirurgia dentária

O tabuleiro de lavagem para cirurgia dentária é uma estrutura em aço inoxidável para colocação de instrumentos de implantologia pequenos e reutilizáveis durante o processo automatizado de lavagem e desinfecção com a utilização de um aparelho de desinfecção térmica.

Compartimentado

- O tabuleiro de lavagem contém dois componentes amovíveis
- O compartimento com suportes permite colocar até 50 instrumentos com a haste para parafusos de fecho em conformidade com as normas ISO
- Compartimento com tampa para colocação de instrumentos pequenos sem parafuso de fecho



Compatibilidade

- Construção em aço inoxidável compatível com soluções enzimáticas e alcalinas utilizadas por sistemas de lavagem/ desinfecção térmica automatizados
- Modelo poroso que permite a passagem de detergente e água durante o processo de lavagem e enxaguamento



Universal

- Para colocação de pequenos instrumentos de implantologia de diferentes sistemas de implantes da ZimVie Dental durante o processo de limpeza automatizada



Informações para encomendas

Referência do produto	Descrição
ZBDWT01	Tabuleiro de lavagem para cirurgia dentária

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site ZimVie.com

ZimVie
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Alameda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
ZV.pedidos@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.®

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da ZimVie e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) e comercializados e distribuídos pela ZimVie Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da ZimVie. ZV2036PT REV A 12/23 ©2023 ZimVie. Todos os direitos reservados.

